

深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2022年11月21日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	厄瓜多尔超甜蕉	2022-11-21	0.731	7.69%	阴性	佳农
2	会理软籽石榴（大果）	2022-11-21	0.715	9.77%	阴性	金刀卯
3	麒麟西瓜	2022-11-21	0.8069	1.45%	阴性	金津
4	红心猕猴桃	2022-11-21	0.8024	1.50%	阴性	一二三农产品
5	富有甜柿	2022-11-21	0.8023	1.50%	阴性	佳沃
6	高乐蜜芒	2022-11-21	0.790	0.30%	阴性	源兴果品
7	有机黄瓜	2022-11-21	0.654	17.42%	阴性	芸岭鲜生
8	黄豆芽	2022-11-21	0.7787	1.68%	阴性	永佳
9	西兰花	2022-11-21	0.691	12.75%	阴性	永佳
10	高原蜜薯	2022-11-21	0.6829	13.78%	阴性	上海林谷鲜
11	大红番茄	2022-11-21	0.708	10.66%	阴性	凯盛浩丰
12	连城翡翠丝瓜	2022-11-21	0.615	22.40%	阴性	生态汇
13	供港 上海青	2022-11-21	0.704	11.15%	阴性	茂雄农业
14	有机菜心苗	2022-11-21	0.706	10.81%	阴性	鑫茂
15	供港 大叶茼蒿	2022-11-21	0.685	13.50%	阴性	高超
16	供港 菜心苗	2022-11-21	0.697	11.96%	阴性	高超
17	雪甜爆浆玉米	2022-11-21	0.659	16.86%	阴性	联合菌业
18	供港 刺黄瓜	2022-11-21	0.523	34.02%	阴性	全发
19	供港 豌豆尖	2022-11-21	0.663	16.30%	阴性	全发
20	枝纯串收番茄	2022-11-21	0.664	16.22%	阴性	火长贸易

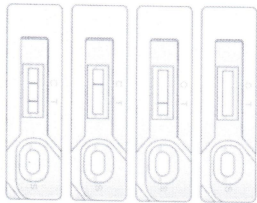
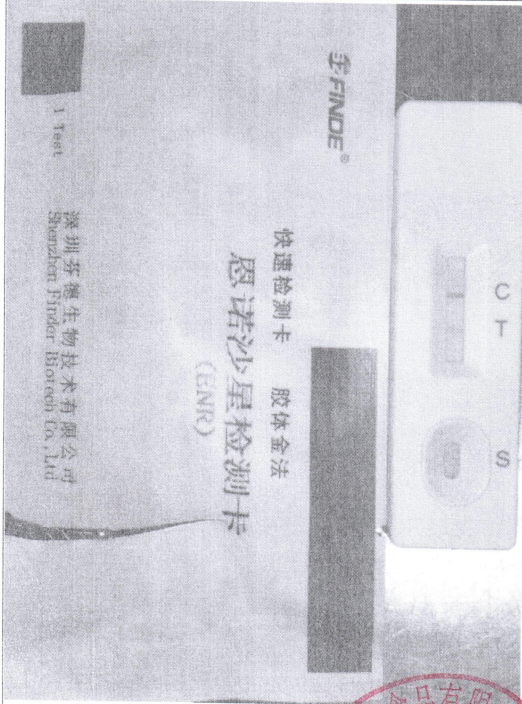
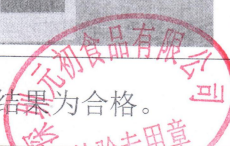
检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药

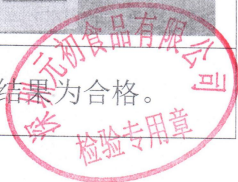
检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）

抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

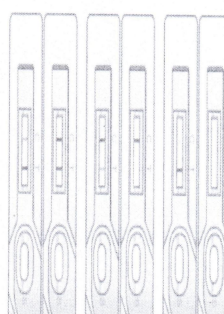
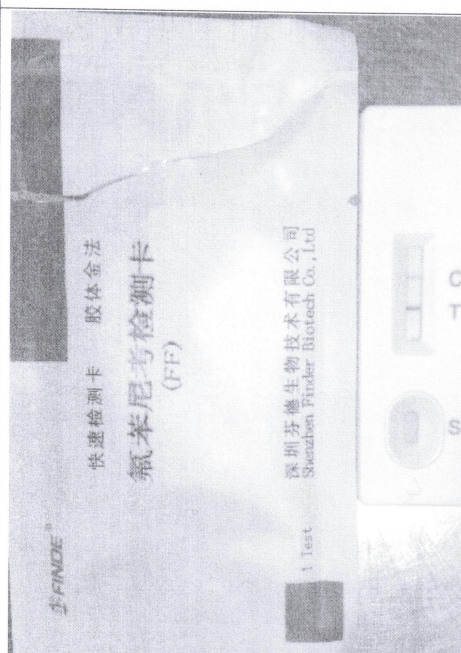


深圳元初总仓恩诺沙星快速检测结果

样品名称	元童 免洗鲜鸡蛋	生产日期	2022-11-20
检测时间	2022-11-21	检测人	吴志强
检测项目	鸡蛋兽药恩诺沙星		
检测内容	判定标准	8 结果判断 阴性：C线、T线均显色，表示样品中浓度低于检测限，或不含有。 阳性：C线显红色，T线不显色，表示样品中浓度高于检测限。 无效：未出现质控C线，表明操作过程不正确或检测卡已失效。  阴性 阳性 无效 无效	
实际检测结果	检测结果图片		
结论	2022-11-20 批次元童 免洗鲜鸡蛋检测结果为合格。 		



深圳元初总仓黄天鹅 可生食鸡蛋快速检测结果

样品名称	黄天鹅 可生食鸡蛋	生产日期	2022-11-18
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	7 结果判断 阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样本中浓度低于检测下限。 阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅,表示样本中浓度高于检测下限。 无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。 		
判定	阴性		
结论	2022-11-18 批次黄天鹅 可生食鸡蛋氟苯尼考检测结果为合格。		

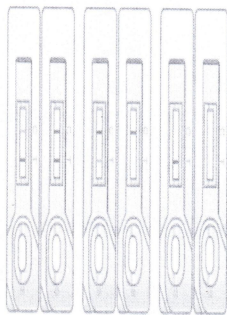
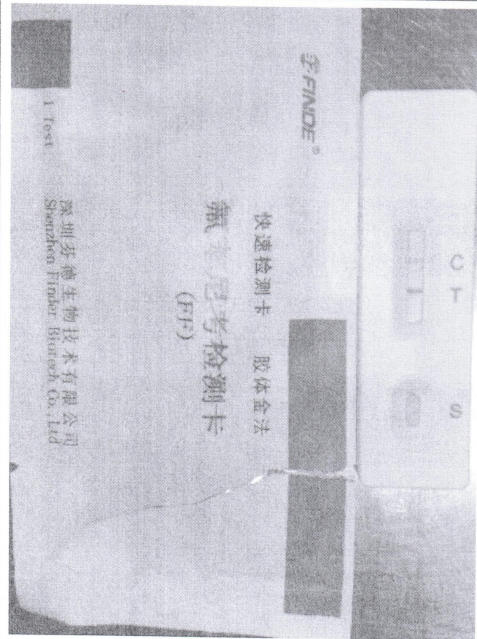
检测人: 吴志强

备注: 氟苯尼考检测下限 0.2ppb (ng/ml)。

检测日期: 2022-11-21



深圳元初总仓元童 免洗鲜鸡蛋快速检测结果

样品名称	元童 免洗鲜鸡蛋	生产日期	2022-11-20
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	7 结果判断  阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样本中浓度低于检测下限。 阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅,表示样本中浓度高于检测下限。 无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。		
判定	阴性		
结论	2022-11-20 批次元童 免洗鲜鸡蛋氟苯尼考检测结果为合格		

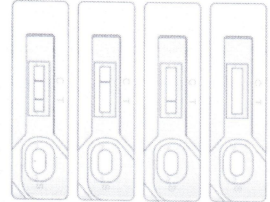
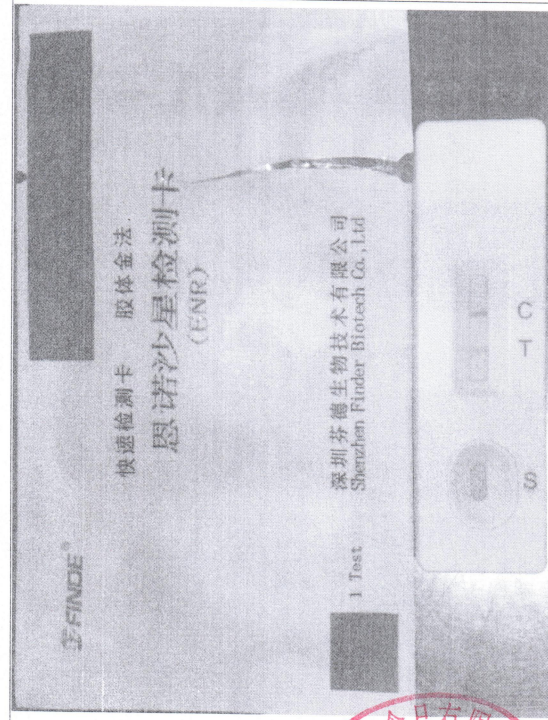
检测人: 吴志强

备注: 氟苯尼考检测下限 0.2ppb (ng/ml)。

检测日期: 2022-11-21



深圳元初总仓恩诺沙星快速检测结果

样品名称	黄天鹅 可生食鸡蛋	生产日期	2022-11-18
检测时间	2022-11-21	检测人	吴志强
检测项目	鸡蛋兽药恩诺沙星		
检测内容	判定标准	8 结果判断 阴性: C线、T线均显色, 表示样品中浓度低于检测限, 或不含有。 阳性: C线显红色, T线不显色, 表示样品中浓度高于检测限。 无效: 未出现质控C线, 表明操作过程不正确或检测卡已失效。  阴性 阳性 无效 无效	
实际检测结果	检测结果图片		
结论	2022-11-18 批次黄天鹅 可生食鸡蛋检测结果为合格。		

